




CHEMOEXFOLIATION  
**ENERPEEL®**

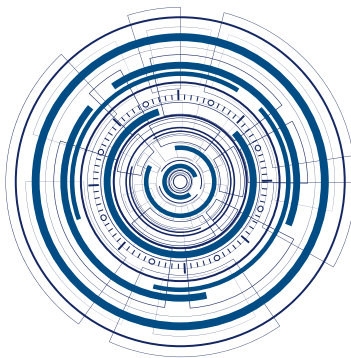

## FICHE PATIENT

### 1. GENERALITÉ PATIENT

Nom et prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Téléphone/Portable \_\_\_\_\_

Age \_\_\_\_\_ ans

Sexe2

☐ F ☐ M

### 2. CRITÈRES D'EXCLUSION – DANS QUELS CAS NE PAS EFFECTUER LE "PEELING" CHIMIQUE

- présence et/ou familiarité aux infections virales sur la zone à traiter.
- interventions chirurgicales récentes (moins de 6 mois) interventions chirurgicales (blépharoplastie, lifting palpébral, etc.).
- maladies et thérapies immunodépresseuses en cours.
- précédente thérapie radiante sur la zone cutanée à traiter pouvant compromettre la régénération physiologique de la peau.
- sujet au développement de chéloïdes et/ou cicatrices hypertrophiques.
- sujet au développement d'hyperpigmentations post-inflammatoires.
- grossesse.
- allaitement.
- allergie et/ou hypersensibilité ou tout autre incompatibilité marquée et/ou probable envers un ou plusieurs composants.
- autres considérations médicales.

### 3. DANS QUELS CAS UTILISER LE DISPOSITIF?

L'exfoliation chimique, en provoquant le détachement et la suppression des cellules épidermiques et en favorisant leur renouvellement, peut exercer une action spécifique de prévention, contrôle, thérapie ou atténuation de certaines pathologies cutanées. Les dispositifs médicaux ENERPEEL® sont indiqués pour être appliqués sur la peau dans un but de prévention, contrôle, thérapie ou atténuation de différentes pathologies cutanées, comme les cicatrices hypertrophiques, les lésions hyper pigmentées, l'élastose cutanée, l'acné inflammatoire, l'acné comédonique, les cicatrices dues à l'acné et les conséquences du dommage actinique parmi lesquelles on trouve les lésions kératosiques qui sont potentiellement précancéreuses.

#### 3.1.1. dommages cutanés de nature actinique

- kératoses actiniques
- dermatophyloses
- élastoses solaires
- altérations de la pigmentation
- lentigos solaires

#### 3.1.2. lésions hyperpigmentées

- mélasma
- hyperpigmentation post - inflammatoire

#### 3.1.3. acné et autres indications

- cicatrices superficielles
- cicatrices dues à l'acné
- kératoses dues aux radiations
- verruques planes
- acné vulgaire
- hyperplasie sébacée
- rosacée papuleuse – pustuleuse

### 4. EVALUATION DU PHOTOTYPE SELON L'ÉCHELLE FITZPATRICK

Classification du phototype selon l'échelle Fitzpatrick

| PHOTOTYPE     | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phototype I   | Sujets à la peau très claire, souvent avec des taches de rousseur, cheveux blonds ou roux, yeux clairs. Ils développent généralement un érythème évident à chaque exposition au soleil non protégée. Le bronzage est très faible ou inexistant. La réaction aux rayons solaires est très élevée, avec un grand risque de dommages permanents. |
| Phototype II  | Sujets à la peau claire, cheveux blonds foncés ou châains clairs. Ils ont tendance à brûler facilement. Développent un bronzage léger (doré).                                                                                                                                                                                                 |
| Phototype III | Sujets à la peau assez foncée, cheveux châains. Ils brûlent seulement après une exposition prolongée. Développent un bronzage intense et homogène.                                                                                                                                                                                            |
| Phototype IV  | Sujets au teint mat, yeux et cheveux noirs. Ils brûlent rarement. Développent en peu de temps un bronzage très intense, couleur chocolat.                                                                                                                                                                                                     |
| Phototype V   | Sujets au teint très mat, yeux et cheveux noirs. Brûlent très rarement.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Phototype VI  | Sujets à la peau noire, yeux et cheveux noirs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**\* Avertissements importants:** les phototypes IV, V et VI de l'échelle de Fitzpatrick peuvent présenter des risques majeurs d'hyperpigmentation sur les zones traitées. Les phototypes I, II, III peuvent développer plus facilement des érythèmes et des cicatrices.

#### PHOTOTYPE DU PATIENT

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

FICHE PATIENT

## 5. EVALUATION DU PHOTOVIEILLISSEMENT SELON L'ÉCHELLE GLOGAU

Classification du photovieillissement selon l'échelle Glogau

| ECHELLE | AGE            | DESCRIPTION                                                                                                   |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légère  | de 28 - 35 ans | Caractérisée par des petites rides avec absence de kératoses                                                  |
| Modérée | de 35 - 50 ans | Caractérisée par des petites rides, couleur jaunâtre avec présence de kératoses actiniques                    |
| Avancée | de 50 - 65 ans | Caractérisée par des rides profondes, présence de télangiectasies, lésions pigmentées et kératoses actiniques |
| Sévère  | de 60 - 75 ans | Caractérisée par des rides dynamiques et gravitationnelles, photovieillissement et kératoses actiniques       |

### PHOTOVIEILLISSEMENT DU PATIENT

Légère ☐ Modérée ☐ Avancée ☐ Sévère ☐

## 6. CLASSIFICATION GÉNÉTIQUE - RACIALE ET CORRESPONDANCE DES RÉPONSES A L'EXFOLIATION CHIMIQUE

Les différences raciales dans la réponse de la peau à l'exfoliation chimique ("peeling" chimique) peuvent être subdivisées en 6 catégories pour lesquelles la couleur de la peau est corrélée aux caractéristiques somatiques. De telles catégories sont basées sur la distribution géographique et sont décrites dans le tableau ci-dessous:

| CATÉGORIE RACIALE                                                  | ORIGINE GÉOGRAPHIQUE                              | TRAITS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PEAU                                            | COMPLICATIONS, EFFETS SECONDAIRES                                             | CANDIDATURE AU PEELING |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (A)<br>Nordiques<br>(Suédois, Irlandais, etc.)                     | Europe du Nord                                    | Couleur de peau claire - très claire. Peau et traits fins.                       | Erythème +++<br>Télangiectasie Cicatrices                                     | Très bonne             |
| (B)<br>Européens<br>(Anglais, Italiens, Allemands, Français, etc.) | Europe centrale<br>Europe du Sud                  | Couleur de peau moyenne. Peau et traits épais.                                   | Basse incidence                                                               | Excellente             |
| (C)<br>Méditerranéens<br>(Espagnols, Grecs, etc.)                  | Afrique du Nord et Asie Occidentale               | Peau plus foncée et traits plus épais par rapport aux Européens.                 | Hyperpigmentations de + à ++<br>Erythème                                      | Très bonne             |
| (D)<br>Indo - Pakistanais<br>(Pakistanais, Thaïlandais, etc.)      | Afrique du Centre Nord et Asie du Sud Occidentale | Peau épaisse et grasse, plus foncée et grossière par rapport aux Méditerranéens. | Hyperpigmentations +++<br>hypopigmentations +                                 | Acceptable             |
| (E)<br>Africains<br>(Noirs d'Amérique, Soudanais, Nigériens, etc.) | Afrique du Centre Sud                             | Couleur de peau de noire à très noire. Peau et traits épais à très épais.        | Hypopigmentations +<br>hyperpigmentations ++                                  | Acceptable             |
| (F)<br>Asiatiques<br>(Japonais, Coréens, etc.)                     | Asie Orientale                                    | Couleur de peau de claire à moyenne foncée. Peau et traits épais à très épais.   | Hyperpigmentations +++<br>Erythème +++<br>qui peut devenir hyperpigmentations | Bonne                  |

**Avertissement:** \* la corrélation entre l'échelle de Fitzpatrick et la classification génétique-raciale peut être utile pour prévoir la réponse cutanée au "peeling" chimique, que ce soit pour l'évaluation de l'efficacité que pour les éventuels effets collatéraux.


### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUE-RACIALES DU PATIENT

(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐

## 7. DEFINITION DE L'UNITE CUTANEE OU DES UNITES CUTANEEES À TRAITER

On entend par unité cutanée la partie de peau qui est soumise à l'exfoliation. Les unités cutanées ont été arbitrairement classifiées dans le tableau présenté ci-dessous:

| UNITE CUTANEE | DESCRIPTION                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | Front                                                                                             |
| B             | Zone zygomatique-joue DROITE<br>(zone périoculaire, sillon nasogénien et zone nez-lèvres compris) |
| C             | Zone zygomatique-joue GAUCHE<br>(zone périoculaire, sillon nasogénien et zone nez-lèvres compris) |
| D             | Cou                                                                                               |
| E             | Décolleté                                                                                         |
| F             | Dos                                                                                               |
| G             | Autres parties du corps                                                                           |

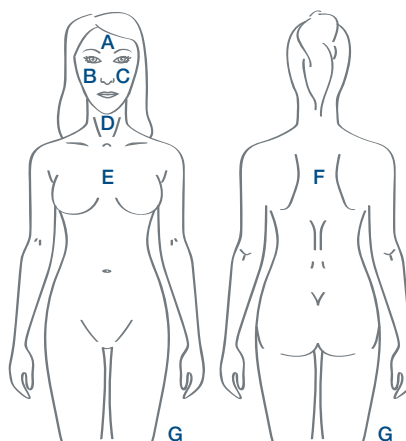

### UNITÉ CUTANÉE À TRAITER

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

## 8. CYCLE DE TRAITEMENTS INDICATIVEMENT PRÉVUS

Nombre de séances \_\_\_\_\_

Date d'exécution du 1er traitement

jj / mm / aaaa

Intervalle de temps entre deux séances \_\_\_\_\_

Date d'exécution du 2ème traitement  
(s'il existe)

jj / mm / aaaa

Durée prévue pour le cycle entier de traitements \_\_\_\_\_

Date d'exécution du 3ème traitement  
(s'il existe)

jj / mm / aaaa

Date d'exécution du 4ème traitement  
(s'il existe)

jj / mm / aaaa

## 9. DISPOSITIF UTILISÉ ET TEMPS D'APPLICATION

Séquence d'application du Dispositif sur les différentes unités cutanées à traiter (si plus d'une)

| ZONE CUTANÉE TRAITÉE | DURÉES D'APPLICATION ET LOT DE PRODUIT UTILISÉ AVANT LA NEUTRALISATION ET/OU EXTRACTION DES PRÉCIPITÉS TRAITEMENTS |                      |                 |                      |                 |                      |                 |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                      | 1er traitement                                                                                                     |                      | 2ème traitement |                      | 3ème traitement |                      | 4ème traitement |                      |
| A                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| B                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| C                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| D                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| E                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| F                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |
| G                    | min.<br>produit                                                                                                    | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot | min.<br>produit | n. de couches<br>lot |

[illegible][illegible]