




CHEMOEXFOLIATION

ENERPEEL® EL-PLUS

• INSTRUKTIONSMANUAL •

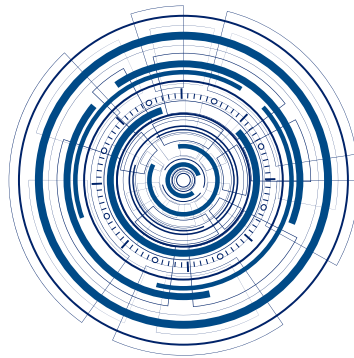

TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery







SVENSKA

MEDICINTEKNISK PRODUKT FÖR KEMOEXFOLIERING OCH KUTAN REMODELLERING AV DE PERIOKULÄRA OCH PERIORALA OMRÅDEN



***VARNINGAR**

För att använda ENERPEEL® EL-PLUS Produkten på ett korrekt och säkert sätt måste denna instruktionsmanual noggrant läsas igenom. ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt består av enfas gel med väldigt låga syravärden (~ 1,20).

Av denna anledning måste informationen och varningar som denna manual innehåller strikt efterföljas för att skydda dig själv och andra mot skador eller materiella skador.

VIKTIGT

*Symbolen * representerar en varningssignal och står alltid jämte en säkerhetsinformation.*

ALLMÄNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Förvara anordningen i en säker miljö, skyddad mot ljus och helst vid en temperatur mellan 15°C och 28°C. För att återställa produkten till sitt ursprungliga skick i händelse av kristallbildning, till följd av felaktig lagring (temperatur under 15°C), är det tillräckligt att lämna anordningen vid en temperatur på cirka 23-28°C i ca 4 timmar.
- Hanteras varsamt och enligt indikationerna gällande Produktens förberedande- och utförandeprocédurer.
- Förvara alltid Produkten och dess tillbehör på en säker plats och lämna dem aldrig i närheten av patienten för att undvika tänkbara risker som kan orsaka olycka eller oönskad kontakt med patienten.
- Stäng alltid Produkten direkt efter användning genom att sätta på ett nytt lock.

- Bär alltid lämpliga kläder under förberedande- och utförandefasen av Produkten.
- Den använda Produkten och dess tillbehör ska, om de inte går att återanvända, slängas i enlighet med nationella och lokala föreskrifter gällande avfallshantering och miljöskydd.
- Produkten innehåller en blandning av syror (mandelsyra, äppelsyra och mjölksyra) och har ett extremt surt pH värde; följ därför första-hjälpen instruktionerna nedan vid händelse av olycka eller oönskad kontakt med Produkten.
 - I fall av oavsiktlig kontakt med obehandlad hud, neutralisera med en 7% natriumbikarbonatlösning och skölj av omsorgsfullt och upprepade gånger med vatten i åtminstone 15 minuter; avlägsna alla förorenade kläder och skor.
 - I fall av oavsiktlig kontakt med ögats bindhinna, skölj rikligt med vatten i minst 15 minuter med öppna ögon. Fortsätt därefter med lämplig behandling.
 - I fall av oavsiktlig kontakt med slemhinnan i munnen, skölj rikligt med vatten i minst 10 minuter.
 - I fall av oavsiktlig förtärande, skölj munnen med vatten.
- Åtgärder vid oavsiktligt spill: tvätta det kontaminerade området rikligt med en 7% natriumbikarbonatlösning, skölj därefter med en riklig mängd vatten.
- Det tillverkande företaget avsäger sig allt ansvar för all skada på ägodelar eller individer orsakade av inkorrekt användande av Produkten.



ENERPEEL® EL-PLUS



1. DEFINITIONER, BAKGRUND OCH OMFATTNING AV PRODUKTEN	sida 6
1.1. Definition av kutana områden, fysikalisk-kemisk form och karaktäristik på avgivningsanordningen, förberedelse och avgivningssystem	sida 8
2. INSTRUKTIONER OCH ANVÄNDNINGSFREKVENNS	sida 10
3. ANVÄNDARKRAV OCH SPECIFIKA KUNSKAPER	sida 11
4. PRELIMINÄR INFORMATION	sida 12
4.1. Exkluderingskriterier - när kemisk "peeling" inte ska utföras	sida 12
4.2. Phototypklassificering enligt Fitzpatrickskalan	sida 13
4.3. Klassificering och relaterad respons till kemisk "peeling"	sida 14
4.4. Klassificering av photo-ageing enligt Glogau	sida 15
5. IDENTIFIKATION AV KOMPONENTERNA	sida 16
6. TEKNISK DATA	sida 16
6.1. ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt	sida 16
6.2. Accessoarer	sida 16
6.2.1. ENERPEEL® PS Preparatory Solution	sida 16
6.2.2. ENERPEEL® NEU Neutralizer	sida 16
7. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING	sida 17
7.1. Preliminära åtgärder	sida 17
7.1.1. Patientkort	sida 17
7.1.2. Patientdeklaration	sida 17
7.2. Initiala procedurer - förberedelsefasen	sida 17
7.3. Appliceringsprocedur	sida 18
8. ANVÄNDNINGSPROCEDUR	sida 20
9. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER PROCEDUREN	sida 21
10. MÖJLIGA REAKTIONER UNDER BEHANDLINGEN	sida 21
11. MÖJLIGA REAKTIONER EFTER BEHANDLINGEN	sida 22

12. EFTERBEHANDLINGSFASEN	sida 22
13. ORDLISTA	sida 23
14. RAPPORTER	sida 25
15. TEKNISK ASSISTANS	sida 25





1. DEFINITIONER, BAKGRUND OCH OMFATTNING AV PRODUKTEN

ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt indikeras för kutan exfoliering och remodellering (kemisk peeling) av de periokulära (inklusive ögonlocken) och de periorala (ej vermilion) områdena. Produkten har designats för att erhålla resultat med en kontrollerad risk, både genom dess fysikalisk-kemiska form och dess unika spridnings- och applikationssystem.

Kemoexfoliering är huvudsakligen indikerad för behandling av vissa dermatologiska tillstånd som karaktäriseras av aktiniska skador. Utöver detta fungerar den även som en skyddsfaktor mot problem som orskas av ljusexponering, inklusive uppkomst av precancerösa keratotiska skador.

Aktinisk skada (klassificerade av vissa författare som ljusåldrande) omfattar en serie av patologiska tillstånd, så som till exempel aktinisk keratos (i vissa fall kan de även ha en precancerös potential), kutan elastos & kutan dyschromia. Kemoexfoliering, dvs avlägsnande av epidermala celler och därefter följande dess förnyelse, ger en specifik preventiv verkan mot uppkomst av kutana skador (t ex aktinisk keratos).

Den Medicintekniska Produkten ENERPEEL® EL-PLUS ska användas för att skapa en yttlig kemoexfoliering (avlägsnande av hornlagret och det yttliga skiktet av vitala epidermis) i de periokulära och periorala områdena. Den ska appliceras på hel hud med målet att förebygga vissa hudpatologier, så som aktiniska skador och i ett bredare perspektiv skador som orsakas av exponering mot solljus.

Vad är kemoexfoliering

Kemoexfoliering är en medicinsk procedur vilken skapar en kontrollerad skada i kutis, som utförs med hjälp av organiska syror. Denna procedur används för att förbättra specifika kutana tillstånd genom att avlägsna

döda hudceller från hornlagret och regenerering och remodellering av den vitala delen i epidermis och/eller dermis, med kapacitet att fysiologiskt modifiera det estetiska utseendet. "Kemisk peeling" av, i synnerhet, periokulära och periorala områden måste utföras försiktigt och med hänsyn till den speciella morfologin i dessa speciella kutana områdena.

Hur är kemoexfoliering klassificerad

Den kemiska exfolierings- (kemisk peeling) klassifikationen beror på vilket kemikalisk ämne som används, dess applikationstid på kutis innan neutralisering eller avtvättning (när det behövs) och vilket djup som nås i kutis, är klassificerad som väldigt yttlig (som påverkar hornlagret), yttlig (som kan nå den vitala delen av epidermis, ner till basalcellslagret), medium-djup (som påverkar den papillära delen av dermis), och djup (som kan nå retikulära dermis). Under den kemiska peelingprocessen kan det hända att kutis vitnar, ett fenomen som även kan kallas "frosting".

Vad är "frosting"

"Frosting" är det synliga utseendet som resulterar från denaturering av epidermala och/eller dermala proteiner (keratin) som kan delas in i 3 nivåer, som beror på djupet som syran når:

Nivå I.

Denna kemiska exfoliering uppstår i det yttliga lagret av huden och/eller i hela epidermis. Det framstår som små vita fläckar med ett mediumintensivt erytem eller, vid fall av djupare verkan, som en mer homogen vitaktig yta genom vilken ett mediumintensivt erytem kan synas.

Nivå II.

Denna kemiska exfoliering uppstår i papillära dermislagret. Det framträder som en homogen vit "lamell" i vilken det kan vara svårt att skönja intensiteten i erytemet.

Nivå III.

Uppstår som ett resultat av kemisk exfoliering utförd i det dermala retikulära lagret. Det framträder i form av en gråaktig färg.

Definitioner: Lager - Session - Kur - Cykel

Lager: En singelapplikation av gelen på den kutana ytan.

Session: En enda utförd behandling.

Kur: Antal förutbestämda sessioner (behandlingar).

Cykel: Antalet kurer som utförs på ett år.

ENERPEEL® EL-PLUS är en Produkt som är tillverkad av en singelfasig gel (pH ~ 1,20) med en speciellt formulerad och blandad syrabas (mandelsyra, äppelsyra och mjölksyra) indikerad för kutan exfoliering och remodellering (kemisk peeling) av det periokulära (inklusive ögonlocken) och periorala (ej vermillion) områdena.

ENERPEEL® EL-PLUS Produkten är designad att utföra flerlayersapplikationer (upp till 4 lager rekommenderas) vid en och samma behandling på varje kutant område (se definitioner på kutana områden i följande punkt 1.1.).

Det rekommenderas, beroende på önskat resultat och naturligtvis även beroende på vilken typ av patient som behandlas, att man genomför en årlig cykel bestående av två sessioner som i sin tur består av två till fyra procedurer (behandlingar).

Tidsintervallet mellan varje session (inklusive en enskild kur) kan variera från 10 till 20 dagar, baserat på typ av patient och önskat resultat. (Se kapitel 2).

ENERPEEL® EL-PLUS är en Produkt som kan utföra kemisk exfoliering (kemisk "peeling") vilken kan definieras som ytlig (som inkluderar hornlagret och den vitala delen av epidermis, ner till basalcellslagret) i relation till exponeringstiden innan neutraliseringsprocessen och den individuella responsen från varje enskild patient. Det kan, emellertid, inte uteslutas att det uppstår en medium-

djup peel (vilken inkluderar den papillära delen av dermis) beroende på antal applicerade lager, kontakttid, antal behandlingssessioner som tidigare utförts, tidsintervallet mellan behandlingssessionerna, patientens genetiskt-etniska karaktär, phototyp och hudtyp.

ENERPEEL® EL-PLUS - procentlig komposition (w/w) av syror: Mandelsyra 20%, Malinsyra 15% (äppelsyra) och Mjölksyra 10%.

VIKTIGA VÄRNINGAR*

- Om det bildas "frosting", beroende på applicerade lager, kontakttider, antalet sessioner som tidigare utförts, tidsintervaller mellan en session och en annan, de genetiska egenskaperna - etniska, fototyp och hudtyp, neutralisera huden omedelbart genom att använda de avsedda våtservetterna ENERPEEL® NEU Neutralizer.
- Anordningen (TebiPen™) åtföljs av engångsapplikatorer som är avsedda för en enskild patient och enbart för en enda procedur. Paketet innehåller 20 engångsapplikatorer som krävs för att utföra lika många sessioner (se "Definition av hudområde, kemisk-fysikalisk form och egenskaper hos behållaren, förberedelser och doseringssystem på nästa punkt 1.1.).
- Produkten kan endast användas fram till utgångsdatumet som står på kartongen.




ENERPEEL® EL-PLUS

1.1. Definition av kutana områden, fysikalisk-kemisk form och karaktäristik på avgivningsanordningen, förberedelse och avgivningssystem.

Kutana områden

Det periokulära och periorala applikationsområdena har godtyckligt delats in i följande kutana delar. (Se figur 1):

KUTAN ENHET	BESKRIVNING
A	Patientens högra periokulära område
B	Patientens vänstra periokulära område
C	Periorala området

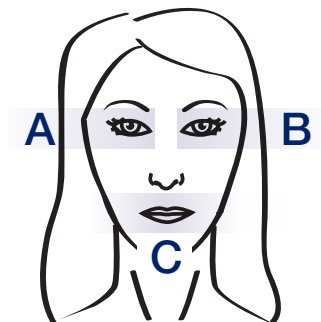

Figur 1

Fysikalisk-kemisk form

Den fysikalisk-kemiska formen är tillverkad av en singelfasig gel med kontrollerad viskositet som reducerar risken att Produkten sprids ut och/eller kommer i direktkontakt med bindhinnan och/eller vermillion.

Anordningen innehåller: Mandelsyra i en koncentration av 20% (viktpcent), äppelsyra i en koncentration av 15% (viktpcent) och mjölksyra vid en koncentration av 10% (viktpcent). Den totala andelen syror motsvarar 45%. (Se tabell 1).

FYSIKALISK-KEMISKA PARAMETRAR	
Fysikalisk-kemisk form	Singelfasig gel
Densitet g/ml (25 °C ± 0,3 °C)	1,15 ± 0,03 g/ml
pH (25 °C)	1,25 ± 0,35
Koncentration av mandelsyra i anordningen (viktpcent)	20% ± 1,20%
Koncentration av äppelsyra i anordningen (viktpcent)	15% ± 0,9%
Koncentration av mjölksyra i anordningen (viktpcent)	10% ± 1,0%

Tabell 1

Karaktäristik på avgivningsanordning, förberedelse och avgivningssystem

TebiPen™ applikationsanordning har specifikt utformats och designats med hänsyn till den kemisk-fysikaliska konsistensen på Eyes&Lips exfolieringsgel, applikationsområdet (periokulära och periorala delen) och för säkerhet och precision vid applicering.

TebiPen™ applikationsanordning ger en precis dos av den exfolierande gelen och dess specifika Applikationsmunstycke borgar för en kontrollerad, precis och säker applikation.


TebiPen™ applikationssystem är sammansatt av följande komponenter:

- en Patron som innehåller exfolieringsgelen och som skyddas av ett återförslutningsbart Säkerhetslock;
- en Sprutformad avgivningsanordning som också skyddas av ett återförslutningsbart Säkerhetslock;
- en engångs Applikatorspets som passar på den Sprutformade avgivningsanordningens munstycke.

Patronen kommer i en individuell och förseglad aluminiumpåse.

Hur man förberder TebiPen™ anordningen för användning:

1. Ta ut Patronen ur dess aluminiumpåse;
2. Avlägsna Säkerhetslocket från Patronens topp;
3. För in Patronen i den Sprutformade avgivningsanordningen; (3-a) genom att rikta in den i styrsystemet tills den låser (3-b);
4. Avlägsna Säkerhetslocket från den Sprutformade avgivningsanordningens topp och sätt fast en engångs Applikatorspets genom att försiktigt trycka ner den i botten.

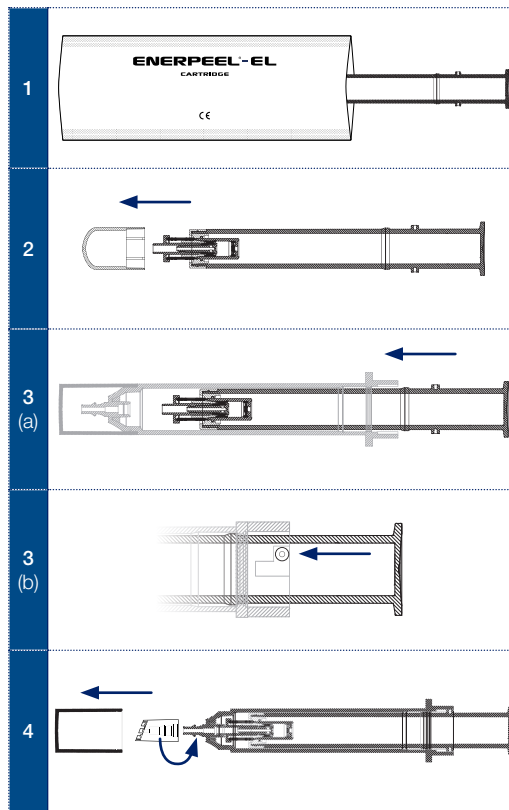

Figur 2

TebiPen™ Anordningen är nu redo för användning, enligt instruktionerna som följer i punkt 7.3 nedan.



ENERPEEL® EL-PLUS





ÖVERSIKT ÖVER DISPENSERINGSMÄNGDERNA

Mängd gel som frigörs vid ett "klick"	~ 0,15 ml ± 0,02
Genomsnittlig yta på varje särskilt kutant område	~ 10 cm ²
Mängden mandelsyra som doseras med ett "klick"	~ 0,030 g
Mängden äppelsyra som doseras med ett "klick"	~ 0,0225 g
Mängden mjölksyra som doseras med ett "klick"	~ 0,015 g

Tabell 2

VIKTIG INFORMATION

Applikationen av exfolieringsgelen har utformats för att låta läkaren styra patientens reaktion på den kemiska "peelingen" på ett mer säkert sätt.

WARNING*: den fastställda ytan på de olika kutana områdena (se Figur 1), och den angivna mängden ska anses som indikativa och gäller med ett visst utrymme för variation och tillhandahålls för att hjälpa läkaren i hans/hennes utvärdering och för att underlätta en mer precis kontroll under applikationen av Produkten. Läkaren måste emellertid vara uppmärksam på att den kemiska effekten (även om kontrollerad) kan variera från patient till patient.

2. INSTRUKTIONER OCH

ANVÄNDNINGSFREKVENS

ENERPEEL® EL-PLUS indikeras för kemoexfoliering av skadade keratinocyter och för att främja tillväxt av nya epidermala celler, och i förlängningen förebygga olika patologier att utvecklas, som är relaterade till ljusexponering (aktinisk skada, aktinisk keratos etc).

Sessionen med ENERPEEL® EL-PLUS är en sammansättning av två till fyra procedurer (behandlinger) som ska utföras med ett tidsintervall på 10-20 dagar.

Vi rekommenderar en cykel av två kurer.

Proceduren med ENERPEEL® EL-PLUS utförs genom att man generellt applicerar upp till fyra lager på alla hudområden. Mängden syra som dispenserar med varje "klick" korresponderar till ungefär 0.15 ml, vilket är den korrekta volymen som krävs för ett komplett lager på varje kutan yta enligt specifikation i punkt 1.1 ovan.

Efter applikationen av varje lager används applikatoren på ett kontinuerligt sätt för att sprida exfolieringsgelen på varje kutant område. Efter ungefär 1-2 minuter, applicera ett andra lager, sedan det tredje och det fjärde. När det fjärde lagret har applicerats, vänta 1-5 minuter (beroende på den enskilde patientens hudreaktivitet) och neutralisera med den specifika ENERPEEL® NEU Neutralizer servetten.

Varje procedur (upp till fyra lager gel på varje hudområde) kräver en kvantitet av ungefär 0,60 ml för varje kutant område.

För att öka den kemo-exfolierande effekten är det möjligt att vänta upp till 5 minuter innan du applicerar nästa lager. I detta fall kan reaktionen på kemo-exfolierande effekten vara mer markant och risken för komplikationer ökar.

Vid frostning, gå genast vidare med neutralisering.

Sammantaget, när man överväger följande kutana områden:

- A. Högra periokulära området (övre ögonlock, undre ögonlock och externa canthus).
- B. Vänstra periokulära området (övre ögonlock, undre ögonlock och externa canthus).
- C. Periorala området (ej inkluderande vermillion).

Mängden av exfolierande gel (4 lager) som används vid en multilagars applicering korresponderar till ungefär 1.8 ml av produkten.

Var Patron med ENERPEEL® EL-PLUS innehåller tillräckligt med gel för 83 applikationer om 0,15 ml vardera. Innehållet i en patron räcker då för 7 procedurer med multilager - med maximalt 4 lager (behandlingar).

Läkaren måste alltid vara medveten om att den kutana responsen mot kemiska "peeling" behandlingar kan öka mellan första och sista behandlingssessionen.

VARNING*: ENERPEEL® EL-PLUS FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ OSKADAD HUD.

3. ANVÄNDARKRAV OCH SPECIFIKA KUNSKAPER

ENERPEEL® EL-PLUS är en anordning som används för att utföra kemo-exfoliering för estetiska ändamål. Anordningen får enbart användas av operatörer med kunskap inom området och en lämplig erfarenhet av den kemiska proceduren vid kemisk exfoliering och remodeling av epidermis och dermis, samt en specifik kunskap om hud och subkutan vävnad:

1. strukturella, morfologiska och funktionella skillnader i de periokulära zonerna, inklusive ögonlocken, och den periorala zonen (ej inklusive vermillion);
2. patologi och naturlig historia vid skador uppkomna av ljusexponering;
3. aspekter som förknippas med årbildning efter "peeling" och kutan remodellering, så som:
 - a. koagulation och inflammation;
 - b. angiogenesis;
 - c. bildning av granular vävnad;
 - d. reepitelisering;
 - e. remodellering av kollagen;
4. kunskap om varierande typer av kemisk "peeling":
 - a. väldigt yttlig;
 - b. yttlig;
 - c. mediumdjup;
 - d. djup;
5. kunskap om phototypskalan (Fitzpatrick);
6. kunskap om responsen på "kemisk peeling" i relation till varierande genetiskt- etniska karaktärstiker;
7. kunskap om photo-ageing (ljusåldrande) skalan (Glogau);
8. kunskap om möjliga oönskade effekter efter kemisk "peeling".



ENERPEEL® EL-PLUS

4. PRELIMINÄR INFORMATION

(4) Injektions-, fillers- och botoxbaserade behandlingar ska endast utföras efter en komplett behandlingscykel med Produkten.

4.1. Exkluderingskriterier - när kemisk "peeling" inte ska utföras

- Frekvent eller tidigare historia av virala infektioner orsakade av Herpes simplex i området som ska behandlas.
- Nyligen utförd (senaste 6 månaderna) operation (ögonlocksplastik, ögonlockslyftning, etc.).
- Immunodepressiva sjukdomar och pågående behandlingar.
- Tidigare strålningsterapi på den del av kutis som ska behandlas som kan påverka den fysiologiska regenereringen av kutis.
- Ärftlighet inom släkten att utveckla keloider och/eller hypertrofiska ärr.
- Ärftlighet inom släkten att utveckla postinflammatorisk hyperpigmentering.
- Graviditet.
- Amning.
- Allergi och/eller hyperkänslighet eller annan känd och/eller tänkbar inkompatibilitet mot en eller flera komponenter.
- Andra medicinska omständigheter.

VIKTIGA VARNINGAR*

- (1) Rökning kan påverka resultatet av behandlingen, det ökar risken för ärr och påskyndar rynkor.
- (2) Phototyperna IV, V, VI enligt Fitzpatricksskalan löper högre risk att utveckla hyperpigmentering i det behandlade området. Phototyp I, II, III är mer benägna att utveckla erytem och ärr.
- (3) Risken att utveckla herpesinfektioner ökar, speciellt i det periorala området.



4.2. Phototypklassificering enligt Fitzpatrickskalan

Phototypen identifierar vilken typ av respons mot solstrålning huden har baserat på flera olika karaktäristiker så som färgen på hår, hud, hur mycket fräcknar och lentigo och den individuella reaktionen mot solstrålning.

Det finns 6 olika phototyper, karaktäriserade enligt nedan (Se Tabell 4):

HUDTYP	BESKRIVNING
Hudtyp I	Individer med väldigt blek hud, ofta med fräcknar, blont eller rött hår, blå eller grå ögon. De utvecklar vanligen tydlig rodnad vid oskyddad solexponering. Utvecklar väldigt lite, eller ingen alls, solbränna. Det blir extrema reaktioner mot solstrålning med hög risk för permanenta skador.
Hudtyp II	Individer med blek hud, mörkblont eller ljusbrunt hår. De bränner sig lätt i solen. De utvecklar en lätt (gylene) solbränna.
Hudtyp III	Individer med relativt mörk hud, brunt hår. De bränner sig endast efter förlängd solexponering. De utvecklar en djup, jämn solbränna.
Hudtyp IV	Individer med olivfärgad hud, mörka ögon och svart hår. Det är ovanligt att de bränner sig. De utvecklar snabbt en mycket djup, chokladfärgad solbränna.
Hudtyp V	Individer med mycket mörk hud, mörka ögon och svart hår. De bränner sig väldigt sällan.
Hudtyp VI	Individer med svart hud, mörka ögon och svart hår.

Tabell 4

* Varning: efter exfoliering tenderar phototyperna III, IV, V, VI att lättare utveckla hyperpigmentering än phototyperna I, II.



ENERPEEL® EL-PLUS

4.3. Klassificering och relaterad respons till kemisk "peeling"

Den etniska skillnaden i hudens respons på kemisk peeling kan indelas i 6 kategorier, där hudens färg är relaterad till kroppsliga kännetecken. Dessa kategorier baseras på geografisk lokalisering och beskrivs i tabellen nedan:

ETNISK KATEGORI	GEOGRAFISKT URSPRUNG	KARAKTÄRISTISKA AV HUD OCH UTSEENDE	KOMPLIKATIONER SIDOEFFEKTER	KANDIDAT FÖR PEELING
Nordisk (Sverige, Irland, etc)	Nordeuropa	Blek till mycket blek hud. Fin hudstruktur.	Erytem +++ Telangiectasier ärrbildning	Mycket lämplig
Europeisk (England, Italien, Tyskland, Frankrike, etc)	Centraleuropa Södra Europa	Mediumfärgad hud. Tjockare hudstruktur.	Sällsynta	Excellent
Medelhavsområdet (Spanien, Grekland, etc)	Nordafrika och Västra Asien	Mörkare hud och mer framträdande särdrag än europeerna.	Hyperpigmentering från + till +++ Erytem +	Mycket lämplig
Indo-Pakistan (Pakistani, Thailand, etc)	Central/Nordafrika Syd/Västasien	Tjock, fet hud, mörkare och tjockare hud än medelhavs huden.	Hyperpigmentering +++ Hypopigmentering +	Acceptabel
Afrikansk (Svarta, Amerikaner, Sudaneser, Nigerianer, etc)	Central/Sydafrika	Svart till mycket svart hud. Huden: tjock till mycket tjock. Särdrag: framträdande till mycket framträdande.	Hypopigmentering + Hyperpigmentering ++	Acceptabel
Asiatisk (Japan, Korea, etc)	Östasien	Hudens färgklassificering varierar från blek till medium mörk hud. Huden tjock till mycket tjock. Särdrag: framträdande till mycket framträdande.	Hyperpigmentering +++ Erytem +++ som kan utvecklas till hyperpigmentering	Bra

Tabell 5

WARNING*: Sambandet mellan Fitzpatrick skalan och den genetisk-etniska klassifikationen kan vara nyttig för att förutse hudens respons på kemisk peeling, både för utvärdering av dess effektivitet och bedömning av tänkbara biverkningar.



4.4. Klassificering av photo-aging enligt Glogau

Photo-aging förhållanden kan beskrivas enligt skalan utvecklad av Glogau, här nedan visad:

SKALA	ÅLDER	BESKRIVNING
Lätt	från 28 till 35 år	Karakteriseras av små rynkor, utan keratosis
Måttlig	från 35 till 50 år	Karakteriseras av små rynkor, gulblek hud med förekomst av aktinisk keratos
Långt framskriden	från 50 till 65 år	Karakteriseras av djupa rynkor, med förekomst av teleangiectasia, pigmentförändring och aktinisk keratos
Svår	från 60 till 75 år	Karakteriseras av dynamiska- och gravitations- rynkor, photo-aging och aktinisk keratos

Tabell 6



ENERPEEL® EL-PLUS

5. IDENTIFIKATION AV KOMPONENTERNA

Varje kit av ENERPEEL® EL-PLUS innehåller följande

komponenter:

- (1) N° 2 Patron med 12,5 ml exfolierande gel vardera,
- (2) N° 1 Sprutformad avgivningsanordning i vilken Patronen med exfolieringsgelen ska inpassas;
- (3) N° 20 engångsservetter ENERPEEL® PS Preparatory Solution - 3 ml
- (4) N° 20 engångsservetter ENERPEEL® NEU Neutralizer - 3 ml
- (5) N° 20 engångs Applikatorspetsar;
- (6) Instruktionsmanual (CD);
- (7) Patientkort (CD);
- (8) Patientdeklaration (CD).

6. TEKNISK DATA

6.1. ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt

Enfas gel med en kontrollerad viskositet, en densitet på ~ 1,14 g/ml och en pH på ~ 1,20 innesluten i en Patron som ska föras in i en Sprutformad avgivningsanordning; en engångs Applikatorspets som ska anpassas på spetsen på den Sprutformade avgivningsanordningen.

6.2. Accessoarier

6.2.1. ENERPEEL® PS Preparatory Solution

Engångsservetter som mättats med en lösning som formulerats för att förbereda huden för kemisk exfoliering. Den ger en specifik verkan av delipidering, vilket främjar en mer enhetlig, effektiv och verkningsfull kemisk exfoliering.

6.2.2. ENERPEEL® NEU Neutralizer

Engångsservetter som mättats med en basisk lösning som innehåller arginine med ett ungefärligt pH ~ 10. Den ger en specifik effekt för att neutralisera de syraexfolierande exfolieringsämnena. Den bidrar till att modulera den kemiska exfolieringsprocessen.



7. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

7.1. Preliminära åtgärder

De preliminära åtgärderna ska anses som fundamentala steg på vilka efterföljande procedurer, och följaktligen korrekt användning av Produkten, är beroende av.

1. sammanställning av patientkortet;
2. ifyllande av patientdeklarationen.

7.1.1. Patientkort

Patientens registerkort ska beskriva och identifiera:

1. patientinformation;
2. exkluderingskriterier - när man inte ska utföra kemisk "peeling";
3. Användningsprocedurer;
4. phototypklassificering enligt Fitzpatricksskalan (punkt 4.2.);
5. ljusåldrandebedömning enligt Glogauskalan (punkt 4.4.);
6. genetisk-etnisk klassificering och relaterad respons mot kemisk "peeling" (punkt 4.3.);
7. definition av kutan yta;
8. uppskattat antal behandlingssessioner;
9. Medicintekniska Produktens antal lager och applikationstid;
10. övriga medicinska noteringar.

7.1.2. Patientdeklaration

Med kunddeklarationen ska patienten informeras om:

1. introduktion;
2. definitioner;
3. syfte med behandling med ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt;

4. Användningsprocedurer;
5. exkluderingskriterier - när kemisk "peeling" ej ska utföras;
6. behandlingsprocedurer och varningar gällande ENERPEEL® EL-PLUS Medicinteknisk Produkt;
7. en enda behandlings duration;
8. uppskattat antal sessioner som behövs för att nå målet med behandlingen;
9. tänkbara bidoeffekter;
10. Procedurer under efterbehandling.

7.2. Initiala procedurer - förberedelsefasen

För korrekt och säker användning av Produkten rekommenderar vi att strikt följa proceduren här nedan beskrivna:

1. positionera patienten i ryggläge i sängen;
2. använd skyddshandskar i gummi eller likvärdigt material;
3. bär lämpliga kläder för den medicinska behandlingen;
4. förbered servetten med ENERPEEL® PS Preparatory Solution;
5. förbered det viskösa Vaselinet;
6. förbered den Medicintekniska Produkten ENERPEEL® EL-PLUS (se Definitioner på kutan yta, fysiokemisk form och karaktäristik på avgivningsanordningen, förberedelser och avgivningssystem i punkt 1.1 ovan);
7. placera kuvertet med ENERPEEL® NEU Neutralizer, fortfarande öppet, inom räckhåll från ENERPEEL® EL-PLUS Produkten.


VIKTIG VARNING*: säkerställ att patienten inte bär makeup och/eller kontaktlinser.



7.3. Applikationsprocedur


För korrekt användning av Produkten rekommenderar vi att strikt efterfölja procedurerna som beskrivs här nedan:

1. Applicera ett tillräckligt lager med visköst Vaseline på patientens läppar 1-2 mm utanför den yttre gränsen på vermillion.
2. Öppna kuvertet med ENERPEEL® PS Preparatory Solution, ta ut servetten och applicera lösningen genom att varsamt gnugga på hudens yta/ytor som ska behandlas^{*(1)}. (Se figur 3).

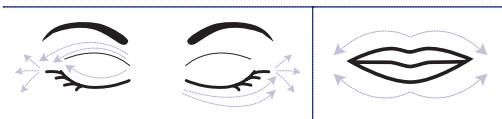


Figur 3

3. Förbered Produkten så som specificerat i punkt 1.1 ovan (Karaktäristik på avgivningsutrustning, förberedelser och avgivningssystem); (Se figur 4).

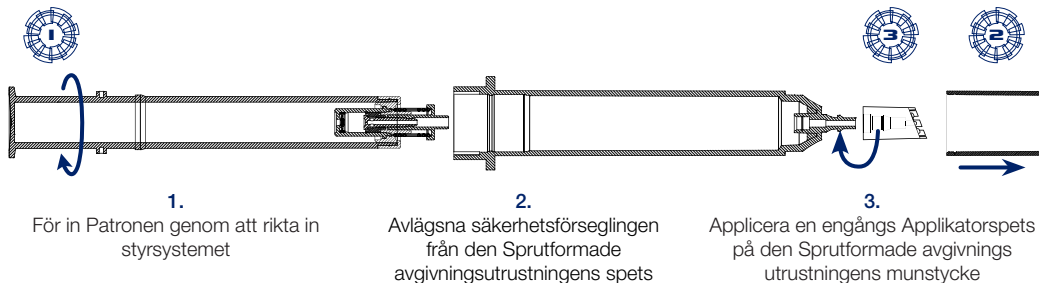

Figur 4

4. Lås upp TebiPen™ genom att vrida Patronen moturs.
5. Positionera TebiPen™ så att den flata delen av Applikatorspetsen riktas uppåt, pressa därefter ned patronen hela vägen för att dispensera den uppmätta mängden gel på Applikatorspetsen (Applikatorspetsen har designats med en liten ving som håller droppen med gel och samtidigt ger den behandlade kutana ytan en specifik massage). (Se figur 5).

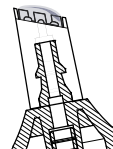


Figur 5

6. Vrid TebiPen™ och håll den mot huden (ifrån ögon och vermillion) och börja använda Produkten.

Notera: vid första användningen behöver du "klicka" den en eller ett par gånger för att fylla kanylen, på den Sprutformade avgivningsutrustningen, med exfolieringsgel. När exfolieringsgelen framträder på applikatorn, avlägsna eventuellt överflöd med en kompress och starta, därefter, att "klicka" återigen så att uppmätt mängd exfolieringsgel förs ut på Applikatorspetsen.

7. Applicera det första lagret med ENERPEEL® EL-PLUS på varje kutan yta som ska behandlas, börja med kutan yta A; upprepa proceduren på alla följande kutana ytor B och C (enligt klassificeringen som listas i punkt 1.1), enligt anvisningarna som visas i Figur 6⁽²⁾;

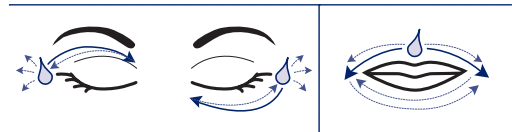


Figur 6

8. Låt det verka i ~ 1 - 2 minuter och förvissa dig om att sprida gelen enhetligt över hela den kutana ytan, med hjälp av Applikatorspetsen⁽³⁾;
9. Repetera proceduren tills ett maximum av 4 rekommenderade lager av gelen har applicerats, i tidsintervaller enligt listan i Tabell 7⁽⁴⁾;

LAGER	REKOMMENDERAD APPLIKATIONSTID
1 ^a Lagret	~ 1-2 minuter
2 ^a Lagret	~ 1-2 minuter
3 ^e Lagret	~ 1-2 minuter
4 ^e Lagret	~ 1-5 minuter
Total tid för en enda session	~ 4-11 minuter

Tabell 7

10. Vänta mellan ~ 1-5 minuter efter den sista applikationen (beroende på den enskilda patientens hudreaktivitet). Fördela gelén på en homogen sätt över hela hudområdet⁽⁵⁾;
11. Avlägsna varsamt all överflödlig gel, eventuellt fortfarande oabsorberad, med en kompress;
12. Utför försiktigt neutraliseringsprocessen⁽⁶⁾ med ENERPEEL® NEU Neutralizer wipe, genom att försiktigt, noga och upprepat applicera den på huden enligt anvisningarna i Figur 7;

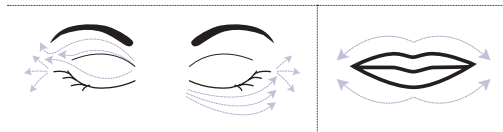

Figur 7

13. Efter sessionen⁽⁷⁾, släng allt använt material och material som inte längre kan användas enligt Europeiska, nationella och lokala bestämmelser rörande miljömässiga hänsyn.

GENERELL VARNING: beroende på patientens hudtyp, phototyp, etnisk-genetisk karaktäristik, antalet tidigare utförda sessioner, gelens kontaktid och den individuella responsen kan, under applikationstiden, "frosting" uppstå: för att då modulera det önskade behandlingsdjupet måste ytan omedelbart neutraliseras efter att de första vita fläckarna blivit synliga. Hudens förbehandling med beredningar på alfa-hydroxysyror (AHA), beta-hydroxysyror (BHA), och/eller keratolytiska ämnen kan leda till en ökad irritation när huden utsätts för den medicinska anordningen ENERPEEL® EL-PLUS.

VARNING:⁽¹⁾ be alltid patienten att han/hon blundar under hela behandlingen.



ENERPEEL® EL-PLUS



WARNING:*(2) applicera gelen med en säkerhetsdistanst på 1-2 mm från kanterna på övre och undre ögonlocket och vermillion.

WARNING:*(3) under varje applikationsfas som inbegriper spridning av gelen är det väldigt viktigt att distribuera gelen jämnt; detta kan utföras med hjälp av applikatorn med vilken varje tänkbar ackumulation av gelen sprids ut på ett enhetligt sätt över hela den kutana ytan.

WARNING:*(4) varje session ska bestå av 4 lager gel. Det är emellertid upp till läkaren att bestämma, om eller inte, alla 4 lager gel ska appliceras, beroende på patientens olika kutana reaktioner.

WARNING:*(5) under applikationen kan tidsintervallen mellan ett lager och nästa och kontakttiden mellan gelen och kutis efter senaste applikationen, och innan neutralisering, ökas efter läkarens bedömning, utifrån deras egna personliga erfarenhet i att utföra den kemiska "peeling" processen med ENERPEEL® EL-PLUS Produkten, eller minska tiden baserat på varje individuell patients kutana reaktivitet. Om patienten känner av en överdriven stickande känsla, är det lämpligt att minska tiden för appliceringen av exfolierande gel och/eller antalet applicerade lager.

WARNING:*(6) neutraliseringsproceduren är ett väldigt viktigt steg för att kontrollera intensiteten av den kemiska "peelingen" och måste utföras effektivt genom upprepad applicering av ENERPEEL® NEU Neutralizer servetten med ett märkbart tryck på det behandlade kutana området under några sekunder.

WARNING:*(7) lås patronen genom att vrida den medurs, avlägsna engångsapplikatorn och förslut Tebipen med säkerhetslocket efter varje användning.

8. ANVÄNDNINGSPROCEDUR

Behandlingen med ENERPEEL® EL-PLUS utförs i tre huvudsakliga steg.

1. Förberedelse

Den här proceduren, som utförs med ENERPEEL® PS Preparatory Solution, förbereder effektivt kutis för en jämn och enhetlig spridning av Produkten.

2. Applikation av produkten

- Detta är den medicinska proceduren vid vilken den kemiska "peelingen" utförs genom att applicera Produkten på den valda hudytan/hudyterna.
- Exfolieringens intensitet, remodelleringens djup och om "frosting" uppstår beror på antal lager gel som appliceras, antalet tidigare utförda behandlingar och Produkts kontakttid med den valda kutana ytan/ytorna.
- Applikationstiden och antal lager med gel som ska appliceras har blivit förbestämd; läkaren måste, i alla fall, ändå noggrant utvärdera hudens respons baserat på hudens yta eller ytor, patientens fototyp, graden av ljusåldrande och/eller kronologiskt åldrande, den genetiskt-etniska karaktäristiken och patientens relativa känslighet.

3. Neutralisering

Denna procedur, som utförs med ENERPEEL® NEU Neutralizer, reducerar syrans styrka genom att modulera "peelingens" djup genom neutralisering.

Varje ett av dessa tre steg beskrivs i detalj i kapitel 7: Instruktion Produkten.

9. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER PROCEDUREN

Under prepareringsproceduren och när Produkten appliceras, kontrollera att alla varnings- och säkerhetsåtgärder har vidtagits.

1. ENERPEEL® PS Preparatory Solution servetter är fuktade med en mängd lösning anpassad för att minimera risken att droppa. Läkaren, måste trots det, visa yttersta hänsyn och be patienten att hålla ögonen och läpparna stängda när lösningen appliceras för att undvika att oavsiktlig kontakt mellan lösningen och bindväven eller vermillion undviks.
2. Produktens applikator främjar en precis applicering av gelen och reducerar därmed risken att oavsiktlig kontakt, med bindhinnan och/eller vermillion, uppstår till ett minimum. Läkaren måste, trots det, vara uppmärksam och följa instruktionerna i de tidigare punkterna 7.3. (Figur 6) och be patienten att hålla ögonen och läpparna stängda under applikationsfasen för att undvika oavsiktlig kontakt mellan gelen och bindhinnan och/eller vermillion.
3. Vid borttagande av överflödigt absorberad gel måste uppmärksamhet visas för att inte föra ner spår av gelen i bindhinnan och/eller vermillion. ENERPEEL® NEU Neutralizer servetterna är fuktade med en anpassad mängd neutraliseringslösning för att reducera syrans styrka och att modifiera "peelingens" djup genom neutralisering. I alla fall måste läkaren vara ytterst uppmärksam och be kunden hålla ögon och läppar stängda under neutraliseringsfasen för att undvika ofrivillig kontakt mellan bindhinnan och/eller vermillion.

10. MÖJLIGA REAKTIONER UNDER BEHANDLINGEN

ENERPEEL® EL-PLUS kan ge en stickande/brännande känsla som i allmänhet når sin maximala intensitet efter de första minuterna och tenderar att förbli konstant i följande minuter tills den reduceras efter neutraliseringen.



ENERPEEL® EL-PLUS

11. MÖJLIGA REAKTIONER EFTER BEHANDLINGEN

Manifestationer som kan uppstå under, omedelbart efter eller i efterbehandlingsfasen beror på varierande variabler, så som den kemiska "peelingens" djup, patientens phototyp, genetisk-etnisk karaktäristik, hudtyp (tjock, tunn, keratosis, etc.), patientens individuella respons, och inkluderar i huvudsak:

- ödem
- erytem
- fjällning
- pigmentvariationer
- andra irriterande reaktioner



12. EFTERBEHANDLINGSFASEN

Den kemiska "peeling" processen tunnar ut det ytliga lagret på kutis. Av denna anledning är den naturliga barriärfunktionen förändrad och hudens respons på framtida behandlingar kan förstärkas. Läkaren måste vara ytterst noggrann vid efterföljande kemiska "peeling" procedurer.

VIKTIGA VARNINGAR*

Undvik att utföra behandling under den mest soliga säsongen. Solstrålning och alla artificiella solningsprocedurer kan utlösa hyperpigmentering.

Varje post-peeling behandling måste noga övervägas av läkaren, eftersom olämpligt bruk av läkemedel, kosmetiska produkter eller applicering av smärtstillande maskar kan försena den fysiologiska restaureringsprocessen av hudens barriär; det är därför nödvändigt att hantera efterbehandlingsfasen i enlighet med läkarens personliga erfarenhet vad gäller farmaceutiska eller kosmetiska ingripanden.

I varje fall måste efterbehandlingsfasen inkludera följande punkter:

1. rekommendera alltid patienten att använda lämpligt skydd mot solstrålning och artificiell strålning (solskyddsfaktor 50+ enligt COLIPA-metoden);
2. rekommendera applicering av produkter som kan modulera melanogenesis-processen;
3. rekommendera applicering av produkter som kan öka hudens elasticitet och är fuktgivande i i underhållssyfte;
4. informera patienten att rengöra den behandlade ytan varsamt och att inte gnugga;
5. informera patienten att inte använda farmaceutiska eller kosmetiska produkter på eget bevåg utan att först konsultera läkaren.

13. ORDLISTA

Äppelsyra – Alfa hydroxylerad organisk syra som finns naturligt i frukt, särskilt i äppelskal. Malinsyra är i form av dess anjon den viktigaste komponenten som produceras i våra kroppar när kolhydrater omvandlas till energi.

Applikationsspets – Den utbytbara engångsdelen som ska fästas på munstycket på den Sprutformade avgivningsanordningen och är avsedd för applicering av exfolieringsgelen. Formen och materialet garanterar en kontrollerad och precis applicering och därmed en säkrare användning av Produkten.

Arginine – Basisk aminosyra som finns i animaliska och vegetabiliska proteiner.

Bas – Kemisk substans som kan ta emot en eller flera protoner (enligt Bronsted och Lowry, 1887).

Behandling – Detta är den medicinska kemiska "peeling" proceduren.

Fitzpatrickskalan – Denna skala identifierar phototypen baserat på hår-, ögon- och hudfärg och på individuell respons mot solstrålning.

Frosting – Vitnande av kutis orsakat av denaturering av epidermala och/eller dermala proteiner efter en kemisk "peeling". Indelas i tre nivåer. (se kapitel 1).

Glogauskalan – Denna skala identifierar graden av individuellt ljusåldrande på basis av ålder och hudskada som orsakats av förlängd exponering mot ultraviolett strålning.

Kemoexfoliering (kemisk "peeling") – Procedur som används för att förbättra specifika hudkonditioner genom att avlägsna döda celler från hornlagret och genom att remodellera epidermis och dermis, beroende på vilket

djup som nås. Den kan klassificeras som väldigt ytlig, ytlig, mediumdjup och djup, beroende på vilket "peeling" ämne som används och på applikationstiden på kutis innan neutralisering eller avtvättning (se kapitel 1).

Komplikationer – Sekundära reaktioner som kan uppstå, vid användning av vissa produkter, tillsammans med de huvudsakliga välgörande effekterna.

Kundkort – Ett skrivet dokument som berör en enda patient, i vilket läkaren definierar behandlingstiden och för in patientens alla karaktärsticker som krävs för att utföra "peeling" behandling med Produkten.

Kutan yta – Den del av huden som behandlas vid den kemiska "peeling" proceduren. De kutana enheterna har godtyckligt blivit klassificerade i följande områden:

A - Högra periokulära området;

B - Vänstra periokulära området;

C - Periorala området (ej inkluderande vermillion).

(Punkt 1.1).

Lager – En enda applicering av Produkten på de behandlade kutana områdena. Ett maximum av fyra lager rekommenderas vid varje session.

Mandelsyra – Aromatisk alfa-hydroxysyra med $C_6H_5CH(OH)CO_2H$ molekylformel. Dermatologisk användning vid behandling av akne, lugnande vid irritation efter laserbehandling av huden och för kemisk peeling inom den estetiska medicinen.

Medicinteknisk Produkt – Medicintekniska produkter är produkter som används för att: påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process, kontrollera befruktning. Medicintekniska produkter skall vara CE-märkta vilket





innebär att föreskrifternas krav uppfylls. Definitionen för medicintekniska produkter liknar i mycket den för läkemedel och det gör att det kan uppstå svårigheter vid gränsdragningen. I huvudsak används produktens verkningsmekanism för att avgöra gränsen, det vill säga om produktens huvudsakliga verkan uppnås genom dess farmakologiska, immunologiska eller metaboliska verkan betraktas produkten inte som en medicinteknisk produkt. (European Directive 93/42/EEC, 47/2007/EC och senare tillägg/integrationer rörande Medicintekniska Produkter).

Mjölksyra – Organisk syra (2-hydroxypropanoic acid) - formulerad $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-COOH}$ som finns naturligt i huvudsak i mjölk. Den spelar en viktig roll vid diverse biokemiska processer. Mjölksyra och laktater har faktiskt visats vara effektiva inhibitorer vid melanogenesprocessen.

Neutralisering – Process eller utförande som består av att addera en bas/syra i form av en ren substans (fast, flytande eller gas), eller i form av en vattenlösning, för att justera pH värdet till det fysiologiska värdet.

Neutralizer – Bas/syra som adderas till syra/baslösning i form av en ren substans (fast, flytande eller gas), eller i form av en vattenlösning, för att justera pH värdet till det fysiologiska värdet.

Patientdeklaration – Ett skrivet dokument i vilket patienten intygar att hon/han har kunskap om den kemiska "peeling" proceduren med Produkten, alla tänkbara relaterade risker, plus risker efter "peeling" behandlingen samt auktoriserar läkaren att utföra behandlingen.

Patron – En färgglad cylinder som innehåller den enfasiga exfolieringsgelen och som ska föras in i den Sprutformade avgivningsanordningen.

pH – Ett värde som uttrycker koncentrationen av vätejoner i en lösning. Det uttrycks som den negativa algoritmen på en

skala av 10, av vätejoners koncentration i en vattenlösning, enligt följande skala:

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+ \text{ koncentration}]$$

pH skalan används för att uttrycka surhet eller alkalinitet i en vattenlösning.

pH = 7 indikerar neutralitet;

pH: 0-7 indikerar surhet;

pH: 7-14 indikerar basiskhet.

Photoåldrande – Kombinationen av biokemiska och histologiska modifieringar i huden, som orsakas av frekvent och förlängd exponering mot ultraviolett strålning som definierar en specifik typ av åldrande i förtid. Ultraviolettera strålar verkar direkt och indirekt genom produktion av fria radikaler, som kan skada DNA, proteiner fosfolipider i cellmembranen (se punkt 4.4.).

Phototyp – Phototypen är en siffra (från I till VI) som indikerar personens känslighet mot solstrålning, i relation till hudens pigmentering och färgen på ögon och hår. Phototypen indikerar till vilken grad huden klarar av att skydda sig själv. (se punkt 4.2.).

Preparatory solution – Sur vatten-alkohollösning lämplig för att förbereda kutis för behandling, med syfte att erhålla så jämn absorption av exfolieringsgelen som möjligt.

Procedur – En enda session. En komplett behandlingskur består av maximum fyra sessioner eller behandlingar på varje enskild patient. Flera kurer på ett år ger en cykel.

Syra – Kemisk substans som kan frisläppa en eller fler protoner (enligt Bronsted och Lowry, 1887). Styran i en syra beror på graden av dissociation i en vattenlösning.

Sprutformad avgivningsutrustning – Komponenten där patronen passas in.

14. RAPPORTER

Utifall om sekundära och oönskade resultat uppstår vid användning av ENERPEEL® EL-PLUS, kemisk exfolierande Medicinteknisk Produkt, ber vi att omgående rapportera varje fall genom att ringa följande nummer +39 0365 529117 eller genom att sammanställa dokumentet Adverse Event Report vilket kan laddas ner från följande adress: regulatoryaffairs@general-topics.com.

Även en uppföljningsenkät aktiveras. I denna enkät, Post-Sales Surveillance Form, kan eventuella kommentarer, relaterade till användning av den Medicintekniska Produkten ENERPEEL® EL-PLUS, lämnas (omdömen baserade på effektivitet och tolerabilitet, eventuella bieffekter, synpunkter, etc), detta formulär kan laddas ner från nätsidan: www.tebitech.com (e-mail: regulatoryaffairs@general-topics.com; fax: +39 0365 522619).

15. TEKNISK ASSISTANS

General Topics s.r.l.

ENERPEEL® Assistance
Via Lungolago Zanardelli, 32
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529121
web: www.tebitech.com
e-mail: info@tebitech.com



ENERPEEL® EL-PLUS

www.tebitech.com



General Topics s.r.l.
Via Lungolago Zanardelli, 32
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.tebitech.com